

mthmedical+



MobiDoc MRT

DER ANTIFERROMAGNETISCHE ANDOCKWAGEN
für den innerklinischen Notfalltransport und die
Patientenversorgung während der
MRT-Untersuchung.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE DES ANDOCKWAGENS MOBIDOC MRT



MRT-EIGNUNG

Der antiferromagnetische Andockwagen für den innerklinischen Notfalltransport kann auch für die **Patientenversorgung während der MRT-Untersuchung** eingesetzt werden.



SICHERES ANDOCKEN

Das Docking-System garantiert die sichere und schnelle Verbindung zwischen der Patiententransporteinheit und MobiDoc MRT bei minimalem Zeit- und Kraftaufwand.



PERSONALENTLASTEND

Die hervorragende Fahrsicherheit und sehr gute Laufeigenschaften garantieren das problemlose Fahren und Rangieren der kompletten Einheit: MobiDoc und Patientenbett - durch nur eine Person - auch auf engstem Raum.



ZEITSPAREND

Der optimal bestückte MobiDoc ist im Handumdrehen angedockt, spart wertvolle Zeit bei der Transportvorbereitung und -durchführung und unterstützt durch die einfache Höhenverstellung von MobiDoc und Patientenbett den Fahrstuhltransport im angedockten Zustand.



SICHER UND EFFIZIENT

Das speziell entwickelte Zubehör gewährleistet das sichere Mitführen des kompletten Notfallequipments - übersichtlich, sicher & effizient, direkt am MobiDoc befestigt. Für die maximale Kontinuität in der Versorgung intensiv- und beatmungspflichtiger Patienten.



INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

MobiDoc MRT ist ein modulares System, das durch multifunktionales Zubehör auf klinikspezifische Anforderungen ausgerichtet ist. Nachträgliches Umrüsten, zum Beispiel aufgrund veränderter Notfallkonzepte, ist bei Bedarf möglich.

Der antiferromagnetische Andockwagen ist speziell für das MRT-Umfeld entwickelt und ermöglicht nicht nur eine sichere und unterbrechungsfreie Patientenversorgung während des innerklinischen Notfalltransportes sondern auch während der MRT Untersuchung (Magnetresonanztomographie).

Weitere Informationen und MR-taugliches Zubehör für den MobiDoc MRT auf mobidoc.net

**NEU
MRT**



MOBIDOC MRT*

Art.Nr. 32MR0702M

MRT EIGNUNG

- >> MR conditional (bedingt MR-tauglich)
- >> 3 Tesla



BASISAUSSTATTUNG

- >> 4 Aluminiumschienen (10 x 25 mm)

ANDOCKSYSTEM

- >> 2 höhenverstellbare Andockklößen (nicht festumgreifend)
- >> zum Andocken an Patientenbetten und Notfallliegen

ROLLFUSS

- >> robuste Rollfußkonstruktion aus Aluminium
- >> RAL 1003 Struktur (Signalgelb) pulverbeschichtet
- >> 4 sehr hochwertige Doppellaufrollen, 125 mm Ø, davon 2 feststellbar
- >> elektrostatische Ableitung

ABMESSUNGEN

- >> der MobiDoc verlängert die Transporteinheit um ca. 360 - 460 mm (abhängig von Patientenbett, Notfallliege)
- >> Breite 660 x Tiefe 535 x Höhe 1.700 mm

MRT ZUBEHÖR FÜR MOBIDOC MRT (3 TESLA)




Infusionsstativ MRT
Art.Nr. 32MR0704MZ



Gelenkarme mit Schlauchhalter MRT
Art.Nr. G0500-MR



Flaschenhalterung MRT
Art.Nr. 32MR0725MZ

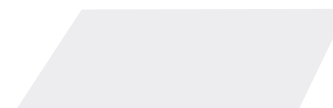

Ablagetablett für Gerätewagen MRT
Art.Nr. 32MR0729MZ



Perfusorhalterung 600 MRT
Art.Nr. 32MR0720MZ



Halteklau Smart 25 MRT
Art.Nr. H9002812MR

Andockwagen und weiteres Funktionsmobiliar

www.mth-medical.com

unverbindlich vereinbaren, Telefon +49 2192 935460

MobiDoc-Demo-Termin



mth medical GmbH & Co. KG

Industriegebiet Winterhagen | Heinrich-Schicht-Straße 4

D 42499 Hückeswagen

Telefon +49 2192 935460 | Telefax +49 2192 935465

info@mth-medical.com

www.mth-medical.com | www.mobidoc.net

**Funktionsmobiliar und Trägersysteme
für Klinik, OP und Pflege**

* Produktmodifikationen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.